

Sortimentsöversikt

Larm- påkallning, passage, epilepsi

Innehåll

Påkallningslarm - sändare	1
Armbandssändare ATOM	1
Universalsändare INKA.....	1
Tillbehör till ATOM.....	2
Tryckplatta HAPA till ATOM.....	2
Tryckplatta LITO till ATOM.....	2
Passagelarm - sändare	3
Sändare DOOR dörrlarm	3
Sändare rörelsevakt IR	3
Sändare rörelsevakt relä med kabel - utgående.....	3
Sänglarm inkl. kontrollenhet, sensor och nätadapter.....	4
Sänglarm Emfit SafeBed inkl. kontrollenhet, sensor och nätadapter	4
Larmmatta 43x75cm inkl. skyddsmatta	4
Epilepsilarm - sändare.....	5
Ep-larm med sensor, kontrollenhet och nätadapter	5
Epilepsilarm Emfit inkl. kontrollenhet, sensor och nätadapter.....	5
Epilepsilarm EPI-900 vibrationsdetektor inkl. sensor.....	6
Ep-larm Falck 6900 EpiKlon - utgående.....	6
Epilepsilarm EpiSafe 2 inkl. kontrollenhet och sensor	6
Mottagare – till alla sändare.....	7
Mottagare HOME 2G inkl. laddfack och väska	7
Mottagare TREX 2G med larmlogg inkl. laddfack och väska.....	7
Mottagare LINK.....	7
Räckviddsförlängare.....	8
Räckviddsförlängare REPO - utgående	8
Räckviddsförlängare REPO+	8

Påkallningslarm - sändare



Armbandssändare ATOM

ATOM är en portabel larmsändare som är avsedd att användas tillsammans med en mottagare. Larmsändaren kan användas antingen runt handleden som en klocka eller runt halsen som ett halsband.

När man tryckt på larmknappen, vilken aktiveras genom att trycka på den röda ytan, skickas en larmsignal till mottagaren. Därefter väntar larmsändaren på kvittens från mottagaren, för att veta att larmet tagits emot. Om ingen kvittens mottages, kommer Atom att skicka larmet igen, nu med högre effekt. Detta upprepas och när en kvittens mottagits kommer lysdioden att ändra färg från rött till grönt.

Vattentät, visuell indikering på låg batterinivå.

Leverantör Zafe care Systems AB www.zafe.se

Förskrivare Arbetsterapeut, kommunsjuksköterska, distriktssköterska

Art nr 27271



Universalsändare INKA

INKA är en sändare, avsedd att användas när man vill koppla ett trådat tillbehör till en mottagare, t.ex. rörelsevakt och epilepsilarm.

Används även då det finns behov av andra manöverkontakter.

INKA har ett antal ingångar, både digitala och analoga. När en av ingångarna aktiverats skickas en radiosignal till mottagaren.


INKA kan strömförsörjas från batterier eller från en extern AC-adapter. Om man använder adapter kan batterierna användas som batteribackup.

Leverantör Zafe Care Systems AB www.zafe.se

Förskrivare Arbetsterapeut, kommunsjuksköterska, distriktssköterska

Art nr 27272

Tillbehör till ATOM

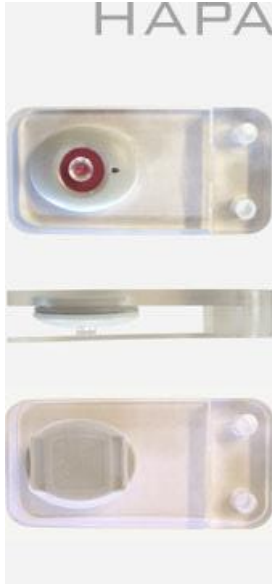

Tryckplatta HAPA till ATOM

Handikappanpassning till ATOM. Den förenklar knapptryckningen på ATOM genom att tryckytan blir större.

Leverantör Zafe Care Systems AB www.zafe.se

Förskrivare Arbetsterapeut, kommunsjuksköterska, distriktssköterska

Art nr 27274



Tryckplatta LITO till ATOM

Handikappanpassning till ATOM. Den förenklar knapptryckningen på ATOM genom att höja tryckkänsligheten.

LITO har en ställbar tryckplatta som via en skruv kan justeras så att larmet kan utlösas med väldigt litet tryck. Passar de som har liten rörlighet.

Leverantör Zafe Care Systems AB www.zafe.se

Förskrivare Arbetsterapeut, kommunsjuksköterska, distriktssköterska

Art nr 27277

Passagelarm - sändare



Sändare DOOR dörrlarm

DOOR är ett litet och smidigt dörrlarm som skickar larmsignal när en dörr öppnas. En magnetgivare fästs på dörren eller dörrkarmen och i anslutning till denna placeras dörrkännaren så att kontakten dem emellan bryts när dörren öppnas.

Leverantör Zafe Care Systems AB www.zafe.se

Förskrivare Kommunsjuksköterska, distriktssköterska

Art nr 27284



Sändare rörelsevakt IR

Rörelsevakten känner av rörelse framför IR-sensorn. Den är monterad på en justerbar fot och kan riktas så att bästa bevakningsområde erhålls. Då en person befinner sig inom detta område, sänder rörelsevakten en radiosignal till mottagaren. Bevakningsområdet är smalt och har en räckvidd på 8-10 meter.

T.ex. kan man placera rörelsevakten vid sidan om sängen, så att man får ett larm då personen går upp ur sängen.

Leverantör Zafe Care Systems AB www.zafe.se

Förskrivare Kommunsjuksköterska, distriktssköterska

Art nr 27265



Sändare rörelsevakt relä med kabel - utgående

Rörelsevakten används för att känna av om en person befinner sig inom bevakningsområdet. Rörelsevakten kopplas in på befintligt larmsystem.

T.ex. kan man placera rörelsevakten vid sidan om sängen, så att man får ett larm då personen går upp ur sängen.

Leverantör Zafe Care Systems AB www.zafe.se

Förskrivare Kommunsjuksköterska, distriktssköterska

Art nr 25373



Sänglarm inkl. kontrollenhet, sensor och nätadapter

Sänglarmet larmar automatiskt om personen inte är tillbaka inom utsatt tid. Tiden är ställbar.

Om personen normalt behöver 10 min. på sig för att gå på toaletten, skickas ett larm om personen inte återkommit inom den utsatta tiden.

Sänglarmet kan även larma omgående när en person lämnar sängen.

Leverantör Zafe Care Systems AB www.zafe.se

Förskrivare Kommunsjuksköterska, distriktssköterska

Art nr 27269



Sänglarm Emfit SafeBed inkl. kontrollenhet, sensor och nätadapter

Sänglarmet larmar automatiskt om personen inte är tillbaka inom utsatt tid. Tiden är ställbar.

Om personen normalt behöver 10 min. på sig för att gå på toaletten, skickas ett larm om personen inte återkommit inom den utsatta tiden.

Sänglarmet kan även larma omgående när en person lämnar sängen.

Leverantör Abilia AB www.abilia.se

Förskrivare Kommunsjuksköterska, distriktssköterska

Art nr 42342



Larmmatta 43x75cm inkl. skyddsmatta

Larmmattan kan användas när man vill bevaka en golvyta.

T.ex. kan man placera larmmattan nedanför sängen, man får då ett larm när personen går upp ur sängen och sätter fötterna på mattan.

Leverantör Knop Rehatek AB www.knop.se

Förskrivare Kommunsjuksköterska, distriktssköterska

Art nr 42337

Epilepsilarm - sändare



Ep-larm med sensor, kontrollenhet och nätadapter

Epilepsilarmet registrerar epileptiska anfall med muskelkramper som t.ex. tonisk-kloniska, hos en person som ligger i sängen.

Epilepsilarmet registrerar onormala och kontinuerliga rörelser över ett på förhand definierat tidsspann.

Sensorn placeras i sängen under madrassen.

Epilepsilarmet passar både barn och vuxna.

Leverantör Zafe Care Systems AB www.zafe.se

Förskrivare Läkare

Art nr 27264



Epilepsilarm Emfit inkl. kontrollenhet, sensor och nätadapter

Emfit epilepsilarm registrerar epileptiska anfall med muskelkramper som t.ex. tonisk-kloniska, hos en person som ligger i sängen.

Emfit epilepsilarm registrerar onormala och kontinuerliga rörelser över ett på förhand definierat tidsspann.

Sensorn placeras i sängen under madrassen.

Epilepsilarmet passar både barn och vuxna.

Leverantör Abilia AB www.abilia.se

Förskrivare Läkare

Art nr 42340



Epilepsilarm EPI-900 vibrationsdetektor inkl. sensor

Epilepsilarm EPI-900 kan detektera vissa typer av anfall när man ligger i sängen, framförallt anfall av typen generaliserat toniskt-kloniska (GTK-anfall)

EPI-900 används självt eller tillsammans med en vibrationssond.

Leverantör KNOP Rehathek AB www.knop.se

Förskrivare Läkare

Art nr 32717



Ep-larm Falck 6900 EpiKlon - utgående

Epilepsilarm EpiKlon registrerar epileptiska anfall av typen generaliserande toniskt-kloniska (GTK-anfall) i säng eller stol.

Sensorn placeras i sängen under madrass.

Epilepsilarmet passar både barn och vuxna.

Leverantör Abilia AB www.abilia.se

Förskrivare Läkare

Art nr 24724



Epilepsilarm EpiSafe 2 inkl. kontrollenhet och sensor

Epilepsilarm EpiSafe 2 registrerar kramper som en följd av generaliserande toniskt-kloniska epileptiska anfall.

Sensorn kan användas både i sängen under natten och vid uppegående.

Epilepsilarmet passar vuxna och större barn, över 40 kg.

Leverantör Abilia AB www.abilia.se

Förskrivare Läkare

Art nr 42341

Mottagare – till alla sändare



Mottagare HOME 2G inkl. laddfack och väska

Bärbar enkel mottagare med uppladdningsbart batteri och färgdisplay. Mottagaren tar emot larm från upp till 3 olika sändare.

Mottagaren larmar med vibration och/eller ljudsignal. Ljudsignalen är ställbar. Levereras med väska.

Leverantör Zafe Care Systems AB www.zafe.se

Förskrivare Arbetsterapeut, kommunsjuksköterska, distriktssköterska

Art nr 36050



Mottagare TREX 2G med larmlogg inkl. laddfack och väska

Bärbar mottagare med uppladdningsbart batteri och färgdisplay. Mottagaren tar emot larm från upp till 255 olika sändare. De 32 senaste larmen lagras i minnet med datum och tid.

Mottagaren larmar med vibration och/eller ljudsignal. Ljudsignalen är ställbar. Levereras med väska.

Leverantör Zafe Care Systems AB www.zafe.se

Förskrivare Arbetsterapeut, kommunsjuksköterska, distriktssköterska

Art nr 33024



Mottagare LINK

Mottagare LINK är avsedd att användas som direktförbindelse från sändare som t.ex. rörelsevakt, ATOM eller DOOR, för inkoppling i befintliga system. Används också då det finns behov av en vibrationskudde.

LINK kan hantera åtta förprogrammerade sändare, t.ex. rörelsevakt, ATOM eller DOOR.

LINK kan strömförsörjas från batterier eller från en extern AC-adapter. Om man använder adapter kan batterierna användas som batteribackup.

Leverantör Zafe Care Systems AB www.zafe.se

Förskrivare Arbetsterapeut, kommunsjuksköterska, distriktssköterska

Räckviddsförlängare



Räckviddsförlängare REPO - utgående

REPO används för att förlänga avståndet mellan sändare och mottagare, då den normala radiotäckningen inte räcker till, t.ex. pga av husväggar av betong.

REPO kan strömförsörjas från det uppladdningsbara batteriet eller från en extern AC-adapter. Om man använder adapter kan batteriet användas som batteribackup, vid ev. strömbortfall.

Leverantör Zafe Care Systems AB www.zafe.se

Förskrivare Arbetsterapeut, kommunsjuksköterska, distriktssköterska

Art nr 27276



Räckviddsförlängare REPO+

REPO+ används för att förlänga avståndet ytterligare mellan sändare och mottagare, då den normala radiotäckningen inte räcker till, t.ex. pga av husväggar av betong.

REPO+ kan strömförsörjas från det uppladdningsbara batteriet eller från en extern AC-adapter. Om man använder adapter kan batteriet användas som batteribackup, vid ev. strömbortfall.

Leverantör Zafe Care Systems AB www.zafe.se

Förskrivare Arbetsterapeut, kommunsjuksköterska, distriktssköterska

Art nr 27283