

Sortimentsöversikt

Lyftar och lyftselar

Innehåll

Uppresningslyft och västar	1
Mobillyft Sabina II EE	1
Lyftsele Trygghetsväst	1
Lyftsele Comfortväst	1
Tillbehör mobillyft Sabina	2
.....	3
Uppresningslyft Quick Raiser 1	3
Lyftsele RgoSling StandUp	3
Tillbehör uppresningslyft Quick Raiser	3
Hjullyftar	4
Mobil personlyft GL5 80mm hjul.....	4
Uno 102 EE med snabbkoppling.....	4
Mobil personlyft GL5 2.0	5
Mobil personlyft GL5.1	5
Hjullyft hopfällbar	6
Molift Smart 150.....	6
Taklyft	7
Lyftselar med låg rygg	8
Lyftsele LowBackSling	8
Lyftsele Micro Plus (Hygiensele)	8
Lyftsele Hygienesling (Hygiensele)	9
Lyftselar med axelhög rygg	10
Lyftsele BasicSling.....	10
Lyftsele Amputation	10
Comfortsele Plus 300 axelhög rygg nätpolyester (hel sele).....	11
Lyftselar med huvudhög rygg	12
Lyftsele HighBackSling	12
Lyftsele FlexibleSling	12
Comfortsele Plus 350 hög rygg nätpolyester (hel sele)	13
Övriga lyftselar	14
Lyftsele Trainer	14
Lyftband EvoSling Flexistrap std 15x115 cm.....	14
Tillbehör till lyftselar	15
Förlängningsband	15
Polstring till lyftselar	15
Nackstöd.....	15
Övriga tillbehör	16

Handy glidlakan	16
Easyglide oval.....	16
Lyftselar med låg rygg, barnstorlekar	17
Lyftsele Micro Plus.....	17
Lyftselar med axelhög rygg, barnstorlekar	17
Lyftsele Basic.....	17
Lyftselar med hög rygg, barnstorlekar	18
Lyftsele Basic hög.....	18
Övriga lyftselar, barnstorlekar.....	18
.....	18
Lyftsele Sit-on (hel sele)	18
Lyftsele Trainer	18
Ståskalsväst	19

Uppresningslyft och västar



Mobillyft Sabina II EE

Utgående artikel

Art nr
20467

Välj lyftbygel:
20976 Sabina II 350 - Lyftbygel
20977 Sabina II Comfortbygel

Avsedd för brukare som aktivt kan medverka vid uppresning och belasta benen.

Används endast med Likos lyftselar.

Leverantör Hill-Rom Liko AB www.liko.se

Brukarvikt max	200 kg
Bredd	69-105 cm
Längd	106 cm
Lyftområde	81-172 cm
Markfrigång	2,5 cm



Lyftsele Trygghetsväst

Art nr
20477 Trygghetsväst M
20478 Trygghetsväst L

Används tillsammans med Sabina II 350 Lyftbygel.

Brukaren har armarna på utsidan av selen

Leverantör Hill-Rom Liko AB www.liko.se

Brukarvikt max 200 kg



Lyftsele Comfortväst

Art nr
26213 Comfortväst S
20339 Comfortväst M
20496 Comfortväst L
24447 Comfortväst XL

Används tillsammans med Sabina II Comfortbygel.

Brukaren har armarna på insidan av selen.

Leverantör Hill-Rom Liko AB www.liko.se

Brukarvikt max 200 kg

Tillbehör mobillyft Sabina



21715
Sabina hälstöd



20624/33128
Polster till
uppresningsväst
(trygghetsväst)
Medium/Large



Uppresningslyft Quick Raiser 1

Art nr
42283

Lyftbygel ingår.
Avsedd för brukare som aktivt kan medverka vid
uppresning och belasta benen.
Används endast med Etacs lyftselar.

Leverantör Etac Sverige AB www.etac.se

Brukarvikt max	160 kg
Chassits bredd	61 cm
Längd	95,5 cm
Lyftområde	99-173 cm
Underredets höjd	7 cm



Lyftsele RgoSling StandUp


Art nr
42278 Lyftsele RgoSling StandUp polstrad XS
42279 Lyftsele RgoSling StandUp polstrad S
42280 Lyftsele RgoSling StandUp polstrad M
42281 Lyftsele RgoSling StandUp polstrad L
42282 Lyftsele RgoSling StandUp polstrad XL

Används tillsammans med uppresningslyft Quick
Raiser.

Leverantör Etac Sverige AB www.etac.se

Brukarvikt max 300 kg

Tillbehör uppresningslyft Quick Raiser

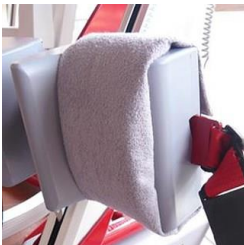

42277
Polstring
underbensstöd



42274, 42275, 42276
Sandaler för fixering av
fötter S/M/L par



42273
Fotplatta höjddjusterbar,
för barn el kort vuxen
Monteras av tekniker.
OBS! brukarvikt max
75 kg

Hjullyftar



Mobil personlyft GL5 80mm hjul

Utgående artikel

Art nr
35034

40225 Bygel S 44 cm omlottkrokar är standardkomponent och levereras med lyften
Övriga lyftbyglar:

40224 Bygel XS 34 cm omlottkrokar

40226 Bygel M 53 cm omlottkrokar

Lyften har snabbkoppling för enkelt byte av lyftbygel.

Leverantör Guldman AB www.guldman.se

Brukarvikt max	205 kg
Bredd	69,5-111,1 cm
Längd	132,2 cm
Lyftområde	45,6-175,9 cm
Underredets höjd	ca 13 cm



Uno 102 EE med snabbkoppling

Utgående artikel

Art nr
30340 Uno 102 EE med snabbkoppling tidigare modell
35528 Uno 102 EE med snabbkoppling och Q-link

30343 Universalbygel 450 är standardkomponent och levereras med lyften

Övriga lyftbyglar:

30342 Universalbygel 350

35530 Universalbygel 600

30341 Kryssbygel 450

30344 Universalbygel 670 twin

Leverantör Hill-Rom Liko AB www.liko.se

Brukarvikt max	175 kg
Bredd	69-109 cm
Längd	124 cm
Lyftområde	44-179 cm
Underredets höjd	11 cm



Mobil personlyft GL5 2.0

Utgående artikel

Art nr

40222 Mobil personlyft GL5 2.0, inkl bygel 44, kabel

40225 Bygel S 44 cm omlottkrokar är standardkomponent och levereras med lyften

Övriga lyftbyglar:

40224 Bygel XS 34 cm omlottkrokar

40226 Bygel M 53 cm omlottkrokar

Lyften har snabbkoppling för enkelt byte av lyftbygel.

Leverantör Guldman AB www.guldman.se

Brukarvikt max	205 kg
Bredd	69,5-141 cm
Längd	137,2 cm
Lyftområde	43,1-173,4 cm
Underredets höjd	11,8 cm



Mobil personlyft GL5.1

Art nr

43322 Mobil personlyft GL5.1, inkl bygel 44, kabel

40225 Bygel S 44 cm omlottkrokar är standardkomponent och levereras med lyften

Övriga lyftbyglar:

40224 Bygel XS 34 cm omlottkrokar

40226 Bygel M 53 cm omlottkrokar

Lyften har snabbkoppling för enkelt byte av lyftbygel.

Leverantör Guldman AB www.guldman.se

Brukarvikt max	205 kg
Bredd	69,5-141 cm
Längd	137,2 cm
Lyftområde	43,1-173,4 cm
Underredets höjd	11,8 cm

Hjullyft hopfällbar



Molift Smart 150

Art nr

36850 Personlyft Molift Smart 150

38573 Transportväska Smart 150

Bygel ingår i lyften.

Lyften är hopfällbar utan verktyg. Kan även monteras isär i två delar för att underlätta transport.

Mjuk transportväska finns som tillbehör.

Leverantör Etac AB www.etac.se

Brukarvikt max	150 kg
Bredd	66-106 cm
Längd	116 cm
Lyftområde	27–168 cm
Underredets höjd	11 cm
Vikt	25 kg

Taklyft



En taklyft består av en takskena under vilken en lyftmotor med höj- och sänkbart lyftband och lyftbygel är monterad. Lyftmotorn rör sig i skenan i en så kallad åkvagn. Taklyften kan förutom att monteras i taket, monteras med väggfästen, golvstolpar eller på fristående ställning på golvet. Man använder samma lyftselar till tak- och hjullyftar. Alla förflyttningar sker under takskenan vilket innebär att man måste förlägga alla lyft till det rum där takskenan är monterad. Taklyftar klarar högre brukarvikt än hjullyftar.

Arbetsgång:

Kontakta tekniker på HMC eller HMF Nyköping innan beställning görs.

Inhämta fastighetsägarens godkännande, använd blankett "överrensommelse lyftmontage" på HMC:s hemsida.

Fyll i blanketten ordination/beställning. Ange önskad bygelbredd. Ange vem som ska kontaktas vid hembesök. Skicka blanketten till HMC eller HMF Nyköping

Tekniker kontaktar förskrivare/personal inför gemensamt hembesök.

Förskrivare ansvarar för utprovning av lyftsele samt uppföljning.

Lyftselar med låg rygg



Lyftsele LowBackSling

Lyftselen finns att beställa i polyestertyg och i polyesternät.

Art nr

35469 LowBackSling XS

35470 LowBackSling S

35471 LowBackSling M

35472 LowBackSling L

35473 LowBackSling XL

35484 LowBackSling XS polyesternät

35485 LowBackSling S polyesternät

35486 LowBackSling M polyesternät

35487 LowBackSling L polyesternät

35488 LowBackSling XL polyesternät

Leverantör Handicare AB www.handicare.se

Brukarvikt max 300 kg



Lyftsele Micro Plus (Hygiensele)

Utgående artikel

Art nr

28040 Micro Plus XS

25546 Micro Plus S

25547 Micro Plus M

30026 Micro Plus L

30238 Micro Plus XL

30240 Micro Plus XXL

Leverantör Guldmann www.guldmann.se

Brukarvikt max 255 kg

Lyftsele Hygienesling (Hygiensele)



Art nr

40218 HygieneSling XS m bälte o extra ryggstöd

40178 HygieneSling S m bälte o extra ryggstöd

37762 HygieneSling M m bälte o extra ryggstöd

40215 HygieneSling L m bälte o extra ryggstöd

40216 HygieneSling XL m bälte o extra ryggstöd

Leverantör Handicare AB www.handicare.se

Brukarvikt max 300 kg

Lyftselar med axelhög rygg

Lyftsele BasicSling

Lyftselen finns att beställa i polyestertyg och i polyesternät.



Art nr

35474 BasicSling XS

35499 BasicSling S

35476 BasicSling M

35477 BasicSling L

35478 BasicSling XL

35489 BasicSling XS polyesternät

35490 BasicSling S polyesternät

35491 BasicSling M polyesternät

35492 BasicSling L polyesternät

35493 BasicSling XL polyesternät

Leverantör Handicare AB www.handicare.se

Brukarvikt max 300 kg

Lyftsele Amputation



Art nr

39915 Amputationssele XS

30183 Amputationssele S

24483 Amputationssele M

24589 Amputationssele L

36542 Amputationssele XL

Leverantör Guldman AB www.guldman.se

Brukarvikt max 255 kg

Comfortsele Plus 300 axelhög rygg nätpolyester (hel sele)



Art nr

37091 Comfortsele Plus, mod. 300 Medium

37090 Comfortsele Plus, mod. 300 Large

43103 Comfortsele Plus, mod. 300 XL

Leverantör Hill-Rom Liko AB www.liko.se

Brukarvikt max 200 kg / storlek XL 300 kg

Lyftselar med huvudhög rygg



Lyftsele HighBackSling

Lyftselen finns att beställa i polyestertyg och i polyesternät.

Art nr

35479 HighBackSling XS

35500 HighBackSling S

35481 HighBackSling M

35482 HighBackSling L

35483 HighBackSling XL

35494 HighBackSling XS polyesternät

35495 HighBackSling S polyesternät

35496 HighBackSling M polyesternät

35497 HighBackSling L polyesternät

35498 HighBackSling XL polyesternät

Leverantör Handicare AB www.handicare.se

Brukarvikt max 300 kg



Lyftsele FlexibleSling

Lyftselen är tillverkad i polyesternät.

Art nr

36488 FlexibleSling XS

36489 FlexibleSling S

36706 FlexibleSling M

36490 FlexibleSling L

36491 FlexibleSling XL

Leverantör Handicare AB www.handicare.se

Brukarvikt max 300 kg

Comfortsele Plus 350 hög rygg nätpolyester (hel sele)



Art nr

37089 Comfortsele Plus, mod. 350 Medium

37088 Comfortsele Plus, mod. 350 Large

37467 Comfortsele Plus, mod. 350 XL

Leverantör Hill-Rom Liko AB www.liko.se

Brukarvikt max 200 kg / storlek XL 300 kg

Övriga lyftselar

Lyftsele Trainer



Art nr
30249 Trainer XS
30250 Trainer S
30251 Trainer M
30252 Trainer L

Ger stöd runt bröstet och skulderna. Avtagbara benremmar ger stöd runt höften och förhindrar att användaren glider ur selen.
Till personer som har nedsatt balans, men som ändå kan bära vikt på benen.

Leverantör Guldman AB www.guldman.se

Brukarvikt max 255 kg

Lyftband EvoSling Flexistrap std 15x115 cm



Art nr
39839

Molift EvoSling Flexistrap kan användas för att lyfta ett ben eller en arm vid omvårdnad eller behandling.
Tillverkad i polstrad polyester.

Leverantör Etac AB www.etac.se

Tillbehör till lyftselar



Förlängningsband

Art nr

24487 Förlängningsband 20 cm, Guldmann

24488 Förlängningsband 30 cm, Guldmann

35582 Anpassningsband 18 cm, Handicare

35583 Anpassningsband 28 cm, Handicare

11703 Förlängningsögla 12 cm, Liko

11704 Förlängningsögla 22 cm, Liko

OBS: Använd förlängningsband från samma leverantör som lyftselen.



Polstring till lyftselar

Art nr

24489 Lammskinsöverdrag till sele, Guldmann

36943 Polstring SoftLegSupport S/M par, Handicare

36903 Polstring SoftLegSupport L/XL par, Handicare

20624 Polster t uppresn.väst M

33128 Polster t uppresn.väst L

Passar till Likos trygghetsväst



Nackstöd

Art nr

30255 Nackstöd

Nackstödet används tillsammans med låg eller axelhög lyftsela. Är ibland ett bra alternativ till att använda huvudhög sele.

Kan även användas tillsammans med lyftsela från annan leverantör

Leverantör Guldmann AB www.guldmann.se

Övriga tillbehör



Handy glidlakan

Art nr

30466 Handy glidlakan kort stl M, 70x70 cm

30465 Handy glidlakan kort XL, 120x85 cm

Handy glidlakan underlättar applicering av lyftselar genom att minska friktionen mellan brukaren och underlaget.

Leverantör Liko AB www.liko.se



Easyglide oval

Art nr

36240 Easyglide oval 85x39 cm, 2-pack

35850 Easyglide oval 45x20 cm, 2-pack

Easyglide oval är en tunn glidskiva som har flera olika användningsområden. Den kan bl a användas för att underlätta applicering av lyftsele. Levereras i 2-pack.

Leverantör Handicare AB www.handicare.se

Lyftselar med låg rygg, barnstorlekar

Lyftsele Micro Plus



Art nr

30232 Micro Plus Kids 4-6 år polyester

30233 Micro Plus Kids 6-10 år polyester

30234 Micro Plus Kids 10-14 år polyester

Micro plus kids har lägre rygg än vuxenmodellen och bältet har spänne istället för kardborre.

Leverantör Guldmann AB www.guldmann.se

Brukarvikt max 255 kg

Lyftselar med axelhög rygg, barnstorlekar

Lyftsele Basic



Art nr

30243 Basic delade förstyvade benstöd kids
4-6 år polyester

30244 Basic delade förstyvade benstöd kids
6-10 år polyester

24618 Basic delade förstyvade benstöd kids
10-14 år polyester

39782 Basic delade benstöd kids 4-6 år nät

39783 Basic delade benstöd kids 6-10 år nät

39784 Basic delade benstöd kids 10-14 år nät

Vid lyft av personer med huvudkontroll, med eller utan bålstabilitet. Stödjer hela kroppen, dock inte huvudet. Armarna hålls innanför selen.

Leverantör Leverantör Guldmann www.guldmann.se

Brukarvikt max 255 kg

Lyftselar med hög rygg, barnstorlekar



Lyftsele Basic hög

Art nr

30241 Basic hög delade benstöd 4-6 år polyester
30242 Basic hög delade benstöd 6-10 år polyester
24621 Basic hög delade benstöd 10-14 år polyester

39785 Basic hög delade benstöd 4-6 år nät
39786 Basic hög delade benstöd 6-10 år nät
39787 Basic hög delade benstöd 10-14 år nät

Hög sele som ger stöd för överkropp och huvud. Något kort ryggdel. Kan vara svårt för brukare med lång överkropp att få tillräckligt stöd. Lattor.

Leverantör Guldman AB www.guldman.se

Brukarvikt max 255 kg

Övriga lyftselar, barnstorlekar



Lyftsele Sit-on (hel sele)

Art nr

39298 Sit-on låg rygg odelade benstöd kids 4-6
39299 Sit-on låg rygg odelade benstöd kids 6-10
43258 Sit-on låg rygg odelade benstöd XS
39300 Sit-on hög rygg odelade benstöd 4-6
39301 Sit-on hög rygg delade benstöd 6-10

Leverantör Guldman AB www.guldman.se

Brukarvikt max 255 kg



Lyftsele Trainer

Art nr

30247 Trainer kids 6-10år polyester
30248 Trainer kids 10-14 år polyester

Ger stöd runt bröstet och skuldrorna. Avtagbara benremmar ger stöd runt höften och förhindrar att användaren glider ur selen.

Till personer som har nedsatt balans, men som ändå kan bära vikt på benen.

Leverantör Guldman AB www.guldman.se

Brukarvikt max 255 kg

Ståskalsväst



Art nr

36398 Ståskalsväst S

36399 Ståskalsväst M

36400 Ståskalsväst L

Ståskalsväst är avsedd för uppresning av brukare som ståtränar med hjälp av ståskal.

Ståskalsvästen används vid själva uppresningen och placeras utanpå ståskalet i liggande och kopplas sedan till en personlyft.

Leverantör Liko AB www.liko.se

Brukarvikt max Stl S 40 kg

 Stl M 60 kg

 Stl L 80 kg

Storleksguide

Mät omkretsen runt brukarens bröstorg. Välj en storlek större på ståskalsvästen än ni skulle ha gjort för en lyftväst till samma brukare.

Omkrets bröstorg 70 cm = S, Omkrets bröstorg 80 cm = M, Omkrets bröstorg 90 cm = L